

Guía rápida | Medición




El Sistema Lynk | Medición con ayuda de cintas métricas

Tamaño del manguito Lynk


El tamaño del manguito puede determinarse utilizando la técnica de la plantilla o una cinta métrica.

PASO 1 | Longitud del manguito

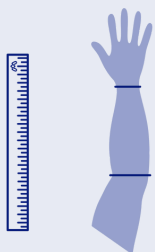

- Mide la longitud entre la muñeca y el codo.
- Si la longitud (L) es < 140 mm, entonces el brazo es demasiado corto para la talla de manguito más pequeña. Contacto support@macu4.com
- Si la longitud (L) está entre 140 mm y 200 mm, entonces se recomienda el manguito SHT (corto).
- Si la longitud (L) es superior a 200 mm, se recomienda el manguito STD (estandard).

PASO 2 | Circunferencia del manguito

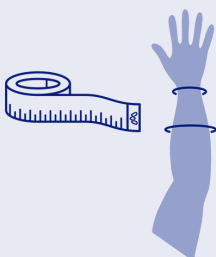

- La medición 1 se toma en la zona de la muñeca.
- La medición 2 se toma en la zona de 10 cm proximal a la muñeca.

TABLA DE TALLAS | Talla del manguito

	Circunferencia de la muñeca (distal) (mm)		Circunferencia a 10 cm proximal de la muñeca (mm)	
	min	max	min	max
Chico (S)	130	150	140	190
Medio (M)	150	180	190	240
Grande (L)	180	200	240	330