

Quick Guide | Vermessung


Das Lynk System | Maßband Technik




Größenbestimmung der Lynk Manschette

Die Größe der Manschette kann mittels Schablonen-Technik oder Maßband erfolgen.

SCHRITT 1 | Länge der Manschette

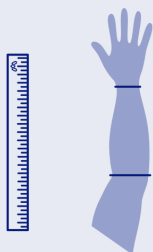

- Messe die Länge zwischen Handgelenk und Ellbogen.
- Länge (L) < 120mm, dann ist der Arm zu kurz für die kleinste Manschettengröße. Kontaktiere support@macu4.com
- Länge (L) liegt zwischen 120mm und 200mm, dann ist die Manschette SHT (kurz) empfohlen.
- Länge (L) ist größer als 200mm, dann ist die Manschette STD (standard) empfohlen.

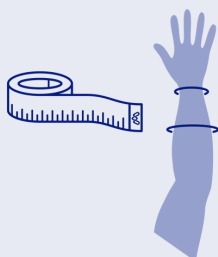

SCHRITT 2 | Umfang der Manschette

- Messung 1 erfolgt im Bereich des Handgelenks.
- Messung 2 erfolgt im Bereich 10cm proximal vom Handgelenk.

MAßTABELLE | Manschettengröße gemäß Umfang

	Umfang Handgelenk (distal) (mm)		Umfang 10 cm proximal von Handgelenk entfernt (mm)	
	min	max	min	max
Extra Klein (XS)	110	130	120	170
Klein (S)	130	150	140	190
Mittel (M)	150	180	190	240
Groß (L)	180	200	240	330