


Das Lynk System

Modulare & anpassbare Orthese



Manschette | Anpassbar

Das offene Design, Schnürsystem und geringe Gewicht sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Der Magnetverschluss macht es einhändig bedienbar.

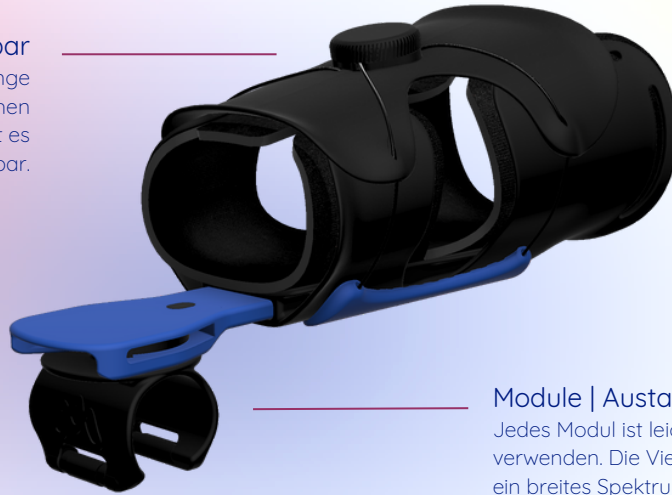

Module | Austauschbar

Jedes Modul ist leicht und einfach zu verwenden. Die Vielfalt der Module unterstützt ein breites Spektrum von Aktivitäten.

Für Menschen mit eingeschränkter Greiffunktion sowie zum Schutz des Handgelenks




benutzerfreundlich und leicht

Mit weniger als 250 g ist das System besonders leicht und komfortabel. Die ergonomische Oberfläche und die optimierte Ein-Hand-Bedienung sorgen für müheloses Handling im Alltag. Module wiegen je nach Konfiguration nur 30 bis 90 g.



kosteneffizient und flexibel

Die Manschette ist in 7 Größen verfügbar und ermöglicht eine optionale Vor-Ort-Testung. Das spart Zeit, verbessert die Anpassung und sorgt für eine sichere Kostenplanung. Gleichzeitig steigert diese Flexibilität die Kundenzufriedenheit.

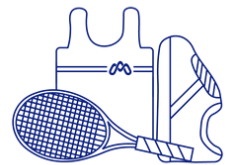

modular und personalisierbar

Dank austauschbarer Module und eines anpassbaren Designs lässt sich das System flexibel für verschiedene Anwenderprofile und Aktivitäten nutzen. Lynk Module sind mit der Lynk Manschette kompatibel oder per Lynk Interface in selbst angefertigten Orthesen integrierbar.



Produktübersicht

Lynk Manschetten, Cover und Module


Manschette

Die Manschette ist in 7 Größen erhältlich. Wähle zwischen zwei Längsoptionen und bis zu vier Umfangsvarianten. Beide Verschlussarten verfügen über einen magnetbasierten Klick-Mechanismus für müheloses Öffnen und Schließen sowie einen sicheren Halt am Arm.



Verschlussarten

Wähle das Cover (links) für Aktivitäten mit höherer Kraftübertragung. Es verfügt über ein Schnürsystem und sorgt für hohe Rotationsstabilität. Den Velcro Hook (rechts) solltest du für Aktivitäten mit geringerer Kraftübertragung wählen.

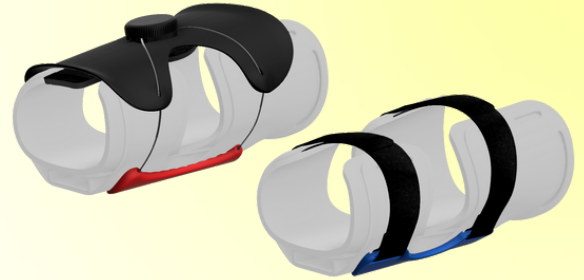

Hold STD Modul

Das Hold STD Modul ermöglicht ein Einklemmen von kleineren bis größeren Objekten mittels Velcro. Das Kugelgelenk und der Schnellspanner erlauben den Modulkopf stufenlos und in sehr vielen Positionen einzustellen. Als Einheitsgröße verfügbar.



Hold Lock Modul

Das Hold Lock Modul ermöglicht ein Einklemmen von z. B. Besteck, ohne dass ein Velcro verwendet werden muss. Optimiert für die einhändige Bedienung. Das Kugelgelenk und der Schnellspanner erlauben den Modulkopf stufenlos und in sehr vielen Positionen einzustellen. Als Einheitsgröße verfügbar.



Hook STD Modul

Das Hook Modul unterstützt Aktivitäten, bei denen etwas getragen, gezogen oder weggedrückt werden soll. Es ist ein guter Begleiter zum Tragen einer Tasche, Ziehen eines Koffers oder Training im Gym. Als Einheitsgröße verfügbar.



Push STD Modul

Das Push Modul unterstützt Aktivitäten, bei denen ein Griff fixiert und Druck- oder Zugkraft ausgeübt werden soll. Es ist ein guter Begleiter zum Gehen mit Krücken (siehe Spezifikationen), eignet sich aber auch für Aktivitäten wie Bogenschießen. Als Einheitsgröße verfügbar.



Clic Lock Modul

Das Clic Lock Modul ermöglicht schnelles An- und Abkoppeln an Griffen / Stangen, an denen ein Clic Kopf montiert werden kann. Inkl. einer Sperrfunktion, die ein Abkoppeln verhindert. Als Einheitsgröße verfügbar und mit 9 verschiedenen Köpfen.



Clic Lock Köpfe

Die Clic Lock Köpfe sind mit drei Rotationsstufen erhältlich (volle, teilweise oder feste Positionierung) und in drei Formen. Sie bieten hohe Flexibilität, da der passende Kopf je nach Aktivität und gewünschter Anbindungsform ausgewählt werden kann.

Produktübersicht


Das Lynk System

Rest Module | Handpositionierung und funktionelle Unterstützung in einem System

Es ermöglicht eine individualisierte Positionierung von Hand und Fingern und erhält gleichzeitig die Möglichkeit, den Großteil* der Lynk Module parallel zu nutzen. Dadurch kann eine funktionelle Unterstützung bei eingeschränkter Greiffunktion erreicht werden. Verwende das Rest Module entweder mit einer personalisierten, von macu4 im 3D-Druck gefertigten Handauflage oder mit einer von dir selbst hergestellten Variante über das Rest Disk Interface.

Lynk Rest Handauflage

Die anpassbare Handpositionierung kann mit spezifischen funktionalen Merkmalen gestaltet werden.

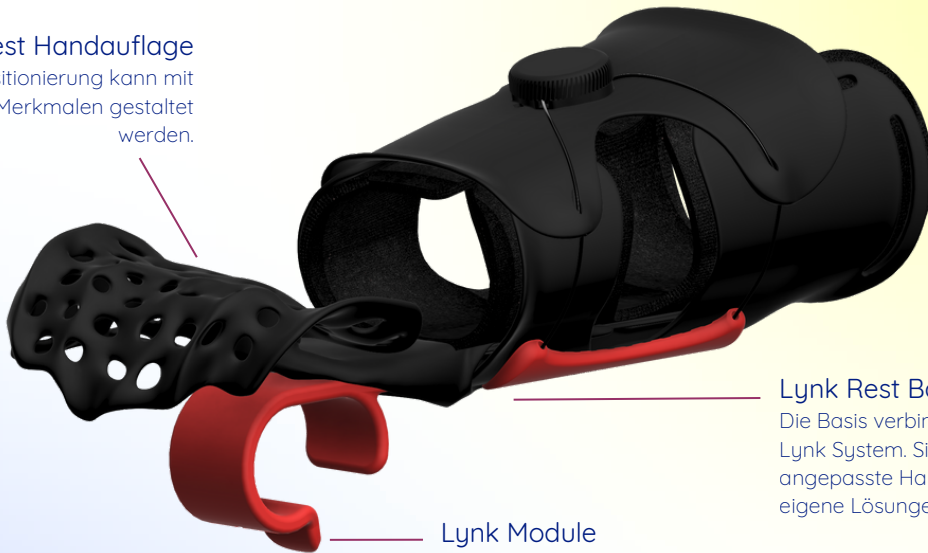

Lynk Rest Basis

Die Basis verbindet die Handauflage mit dem Lynk System. Sie ermöglicht eine individuell angepasste Handauflage über macu4 oder eigene Lösungen mittels des Rest Disk Interfaces.


Lynk Module

Nutze den Großteil der Lynk Module*, die eine große Bandbreite an Aktivitäten unterstützen.



kompatibel und unterstützend

Als Ergänzung zum Lynk System kombiniert das Rest Modul eine ergonomische Handpositionierung mit passiver funktioneller Unterstützung. Es ermöglicht eine stabile Positionierung der Hand, während dir weiterhin der Großteil der Lynk Module zur Verfügung steht.

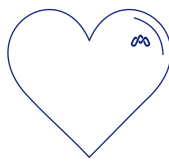

personalisiert und anpassbar

Individuell angepasste Handauflagen – von macu4 gestaltet oder von dir selbst gefertigt. Das bewegliche Gelenk erlaubt eine präzise, multidirektionale Ausrichtung, damit die Positionierung optimal zu deinen anatomischen und funktionellen Bedürfnissen passt.



zeit- und kosteneffizient

Die ausgelagerte, maßgeschneiderte Fertigung reduziert den klinischen Aufwand sowie die Anpassungszeit. Das führt zu geringeren Gesamtkosten und einem effizienteren, skalierbaren Versorgungsprozess.

Das Lynk System eignet sich für eine Vielzahl von Pathologien und unterstützt Alltags-, Freizeit- und Sportaktivitäten | Für Kinder und Erwachsene geeignet | Erhältlich in Standardgrößen | Kombinierbar mit einer Handpositionierungslösung

* Das Push Modul ist nicht kompatibel mit dem Rest Modul

Bestellformular

Das Lynk System

Schritt 1 | Manschettengröße auswählen

Wähle die benötigte Manschettengröße anhand der Messanleitung aus.

LYNK | MANSCHETTE

Größe

☐ extra klein  kurz	☐ klein  kurz	☐ klein  standard	☐ mittel  kurz
☐ mittel  standard	☐ gross  kurz	☐ gross  standard	

Farbe

☐  schwarz	☐  weiß
---	---



Der Quick Guide Vermessung bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der richtigen Größe des Lynk Systems.

Schritt 2 | Verschlusssystem für die Lynk Manschette auswählen

Wähle das benötigte Verschlusssystem entsprechend deinen Bedürfnissen aus.

LYNK | VELCRO HOOK


Größe

☐ XS	☐ M
☐ S	☐ L

Hinweis

Stelle sicher, dass dieselbe Größe wie für die Manschette gewählt wird.

Farbe

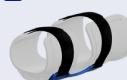☐  schwarz	☐  blau	☐  rot
--	---	--

Armseite

☐ rechts
☐ links

LYNK | COVER


Größe

☐ S
☐ M
☐ L

Hinweis

Stelle sicher, dass dieselbe Größe wie für die Manschette gewählt wird.

Farbe

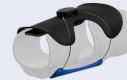☐  schwarz schwarz	☐  schwarz blau	☐  schwarz rot
☐  weiß schwarz	☐  weiß blau	☐  weiß rot

Bestellformular

Das Lynk System

Schritt 3 | Wähle die Module entsprechend gewünschten Aktivitäten aus

Wähle die benötigten Module entsprechend deinen Anforderungen.

LYNK | CLIC LOCK MODUL

Farbe



Hinweis: Das Modul enthält zwei Modulköpfe (70 und 360 in STD). Es verfügt über eine Verriegelungsfunktion (Lock Plug). Das Modul ist mit allen Clic Lock Köpfen kompatibel.

LYNK | CLIC LOCK KÖPFE

Der Clic Lock Plug ist beim Kauf eines einzelnen Clic Lock Kopfes nicht enthalten.

Kopf Typ | STD



Hinweis: Befestigung an Griffen, Stangen oder Bügeln. Unterstützte Durchmesser: 26 mm bis 32 mm. Für sichere Fixierung Kabelbinder oder Klettverschluss verwenden.

Kopf Typ | ELLIPSE



Hinweis: Befestigung an ovalen Stangen/Bügeln oder zylindrischen Objekten (Durchmesser > 32 mm). Für sichere Fixierung Kabelbinder oder Klettverschluss verwenden.

Kopf Typ | FLAT



Hinweis: Dieser Kopf dient (1) zum Aufkleben einer Magnetscheibe zur Befestigung eines Smartphones oder (2) als Basis zur Erstellung individueller Formen.

LYNK | HOOK STD MODUL

Farbe




LYNK | PUSH STD MODUL

Farbe




LYNK | HOLD STD MODUL

Farbe

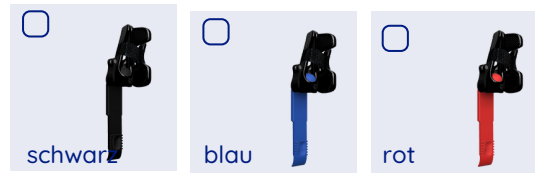

LYNK | HOLD LOCK MODULE

Farbe

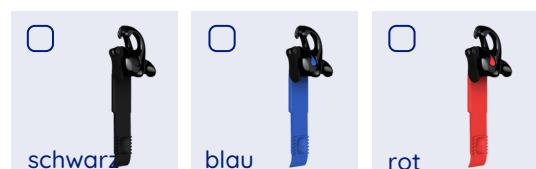

Bestellformular

Das Lynk System

Wenn du die Lynk Module mit deiner individuell angepassten Orthesenmanschette oder deinem Prothesenschaft kompatibel machen möchtest, wähle das Interface.

LYNK | INTERFACE

Für Laminierung



Hinweis: Siehe Montageanleitung



Für Verschraubung



Hinweis: Siehe Montageanleitung



Wenn du eine Hand-Finger-Unterstützung in Kombination mit der Lynk Manschette und den Modulen benötigst, wähle das Rest Modul.

LYNK | REST MODUL

Rest Basis



Rest Disk Interface



mit Löchern



mit Schlitz

Handauflage, personalisiert durch macu4



Hinweis: Verwende das Formular, um deine Designanforderungen einzureichen.

