


Le Système Lynk

Orthèse modulaire & adaptable



Système de fermeture | Velcro Hook ou Cover
Choisissez entre la fermeture Velcro Hook et la Cover selon l'activité souhaitée. Leur fermeture magnétique permet une utilisation facile d'une seule main.

Base | Manchette
Son design ouvert, et sa légèreté la rendent très agréable à porter.

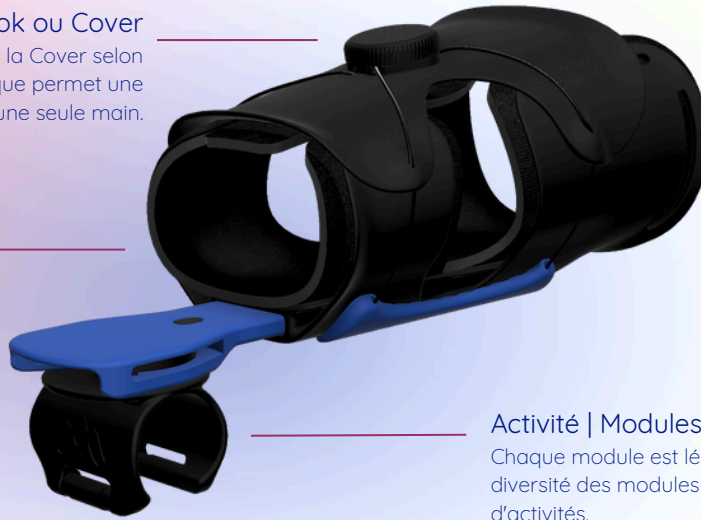

Activité | Modules

Chaque module est léger et facile à utiliser. La diversité des modules permet un large éventail d'activités.



Pour les personnes ayant une préhension limitée et pour la protection du poignet



**intuitif
et pratique**

Avec moins de 250 g, le système est léger et confortable. La forme ergonomique et la manipulation optimisée pour un usage à une seule main garantissent une utilisation sans effort au quotidien. Le poids d'un module varie entre 30 g et 90 g selon la configuration.



**économique
et flexible**

La Manchette est disponible en 7 tailles. Le système offre la possibilité d'un test sur place en option. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'augmenter la sécurité en matière de planification des coûts et de satisfaction.



**modulaire et
personnalisable**

Grâce à des modules interchangeables et à un design adaptable, le système répond à différents profils de personnes et d'activités. Les Modules Lynk sont compatibles avec la Manchette Lynk ou peuvent être intégrés dans des orthèses fabriquées sur mesure grâce à l'Interface Lynk.



Aperçu des produits

Le Système Lynk


Manchette

La Manchette est disponible en 7 tailles. Choisissez entre deux options de longueur et jusqu'à 4 circonférences. Les deux types de fermetures intègrent un mécanisme d'encliquetage magnétique pour une ouverture et une fermeture faciles, ainsi qu'une fixation sûre sur le bras.



Système de fermeture

Choisissez la Cover (à gauche) comme type de fermeture pour les activités impliquant une transmission de force plus élevée. Elle dispose d'un système de laçage et offre une grande stabilité. Choisissez le Velcro Hook (à droite) pour les activités avec une transmission de force plus faible.

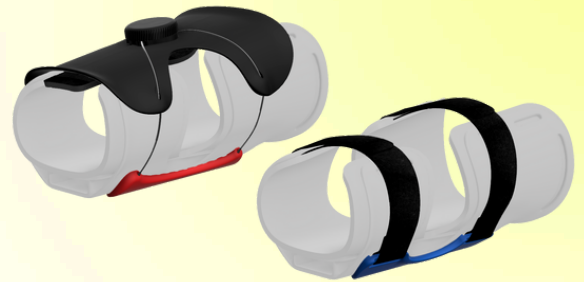

Module Hold STD

Le Module Hold STD permet de serrer des objets de petite à grande taille à l'aide de Velcro. L'articulation à rotule et le dispositif de serrage rapide permettent de régler la tête du module en continu et dans de très nombreuses positions. Disponible en taille unique.



Module Hold Lock

Le Module Hold Lock permet de coincer des couverts, par exemple, sans devoir utiliser de Velcro. Optimisé pour une utilisation à une seule main. L'articulation à rotule et le dispositif de serrage rapide permettent de régler la tête du module en continu et dans de très nombreuses positions. Disponible en taille unique.



Module Hook STD

Le Module Hook soutient les activités au cours desquelles quelque chose doit être porté, tiré ou repoussé. C'est un bon compagnon pour porter un sac, tirer une valise ou s'entraîner à la gym. Disponible en taille unique.



Module Push STD

Le Module Push soutient les activités pour lesquelles une poignée doit être fixée et une force de poussée ou de traction exercée. Il est un bon compagnon pour la marche avec béquilles (voir les spécifications), mais convient également pour des activités comme le tir à l'arc. Disponible en taille unique.



Module Clic Lock

Le Module Clic Lock offre une connexion et une déconnexion rapides des poignées/barres sur lesquelles une tête Clic peut être montée. Inclut une fonction de verrouillage qui empêche la déconnexion. Disponible en taille unique et avec 9 têtes différentes.



Tête Clic Lock

Les têtes Clic Lock sont disponibles avec 3 niveaux de rotation (rotation complète, partielle ou position fixe) et en 3 formes. Elles offrent une grande flexibilité pour choisir la tête en fonction de l'activité et des différentes géométries de fixation.


Aperçu des produits

Le Système Lynk

Module Rest | Positionnement palmaire et soutien fonctionnel en un seul système

Le Module Rest s'utilise avec la Manchette Lynk. Il permet un positionnement sur mesure de la main et des doigts tout en conservant la possibilité d'utiliser la majorité* des Modules Lynk en parallèle. Il offre ainsi un soutien fonctionnel en cas de préhension altérée.

Utilisez le Module Rest soit avec un Support Palmaire sur mesure imprimé en 3D par macu4, soit avec un support fabriqué par vos soins à l'aide de l'Interface Rest Disk.

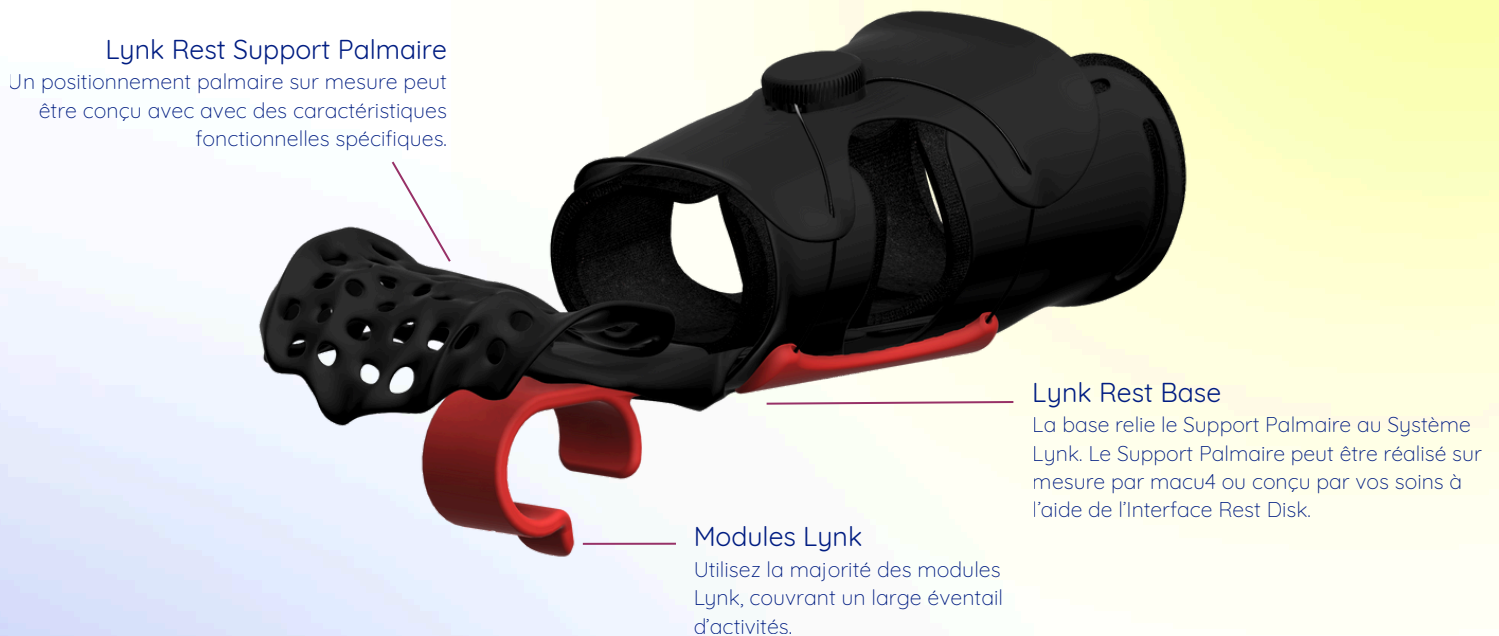

compatible et fonctionnel


En complément du système Lynk, le Module Rest associe un positionnement ergonomique de la main à un soutien fonctionnel passif.

Il permet un maintien stable tout en conservant l'accès à la majorité des modules Lynk.



personnalisé et ajustable

Support Palmaire sur mesure, conçu par macu4 ou réalisé par vos soins. L'articulation permet un positionnement précis, multidirectionnel, adapté aux besoins anatomiques et fonctionnels de chaque personne.

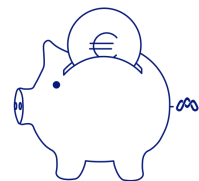

gain de temps et économique

La production sur mesure externalisée réduit la charge de travail et le temps d'ajustement.

Elle diminue ainsi les coûts globaux et permet un processus de prise en charge plus efficace et évolutif.

Le Système Lynk convient à de nombreuses pathologies et accompagne les activités du quotidien, de loisirs et sportives | Adapté aux enfants et aux adultes | Disponible en tailles standard | Compatible avec une solution de positionnement de la main.

Formulaire de commande








Le Système Lynk

Étape 1 | Sélectionnez la taille de la manchette

Choisissez la taille de la manchette appropriée en suivant les instructions de mesure.

LYNK | MANCHETTE

Taille

<input type="checkbox"/> extra small  short	<input type="checkbox"/> small  short	<input type="checkbox"/> medium  short	<input type="checkbox"/> large  short
<input type="checkbox"/> small  standard	<input type="checkbox"/> medium  standard	<input type="checkbox"/> large  standard	

Couleur

<input type="checkbox"/>  noir	<input type="checkbox"/>  blanc
--	--



Le Quick Rapide | Prise de mesures fournit une procédure pas à pas pour sélectionner la bonne taille.

Étape 2 | Sélectionnez le système de fermeture pour la manchette

Choisissez le système de fermeture requis selon vos besoins.

LYNK | VELCRO HOOK

Taille

<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> M	Remarque: Veillez à choisir la même taille que pour la manchette.
<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> L	

Couleur

<input type="checkbox"/>  noir	<input type="checkbox"/>  bleu	<input type="checkbox"/>  rouge
---	---	--

Côté (bras)

<input type="checkbox"/> droit
<input type="checkbox"/> gauche

LYNK | COVER

Taille

<input type="checkbox"/> S	Remarque: Veillez à choisir la même taille que pour la manchette.
<input type="checkbox"/> M	
<input type="checkbox"/> L	

Couleur

<input type="checkbox"/>  noir noir	<input type="checkbox"/>  noir bleu	<input type="checkbox"/>  noir rouge
<input type="checkbox"/>  blanc noir	<input type="checkbox"/>  blanc bleu	<input type="checkbox"/>  blanc rouge

Formulaire de commande

Le Système Lynk

Étape 3 | Choisissez les modules en fonction des activités souhaitées

Choisissez les modules nécessaires en fonction de vos besoins.

LYNK | MODULE CLIC LOCK

Couleur



Remarque : Le module contient 3 têtes de module (0, 70, et 360 en STD).
Le module ne dispose pas de fonction de verrouillage.

LYNK | TÊTES CLIC LOCK

Le Clic Lock Plug n'est pas inclus lors de l'achat d'une seule tête Clic Lock.

Tête de module | STD



Remarque : Fixation sur des poignées, tiges ou barres. Diamètres compatibles : 26 mm à 32 mm. Utilisez un collier de serrage (serre-câble) ou une sangle Velcro pour une fixation sûre.

Tête de module | ELLIPSE



Remarque : Fixation sur des tiges/barres ovales ou des objets cylindriques (diamètre > 32 mm). Utilisez un collier de serrage (serre-câble) ou une sangle Velcro pour une fixation sûre.

Tête de module | FLAT



Remarque : Cette tête sert (1) à coller un disque magnétique pour maintenir un smartphone ou (2) de base pour créer des formes personnalisées.

LYNK | MODULE HOOK STD

Couleur



LYNK | MODULE PUSH STD

Couleur




LYNK | MODULE HOLD STD

Couleur



LYNK | MODULE HOLD LOCK

Couleur

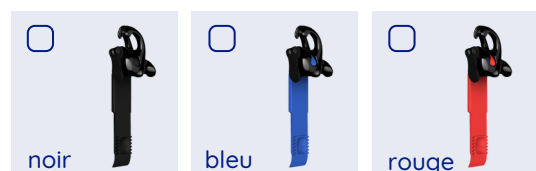

Formulaire de commande

Le Système Lynk

Si vous souhaitez rendre les modules Lynk compatibles avec votre propre orthèse ou votre emboîture sur mesure, choisissez l'Interface.

LYNK | INTERFACE

Assemblage par stratification



Remarque :
Veuillez consulter
les instructions de
montage.



Assemblage par vissage



Remarque :
Veuillez consulter
les instructions de
montage.



Si vous avez besoin d'un support palmaire combinaison avec la Manchette Lynk et les modules Lynk, choisissez le Rest Module.

LYNK | REST MODULE

Rest Base



Rest Disk Interface



Rest Support Palmaire, par macu4



Remarque : Utilisez le
formulaire pour soumettre
vos exigences de
conception.

